

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию

Дата выпуска:

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи:

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»


142400, г. Ногинск, Московская область, ул. 200 лет города, дом 2
Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

**Мебель медицинская смотровая
ММС-«Горское»**

ТУ 9452-004-49894635-2010

Паспорт

Банкетка со спинкой БМС- «Горское»

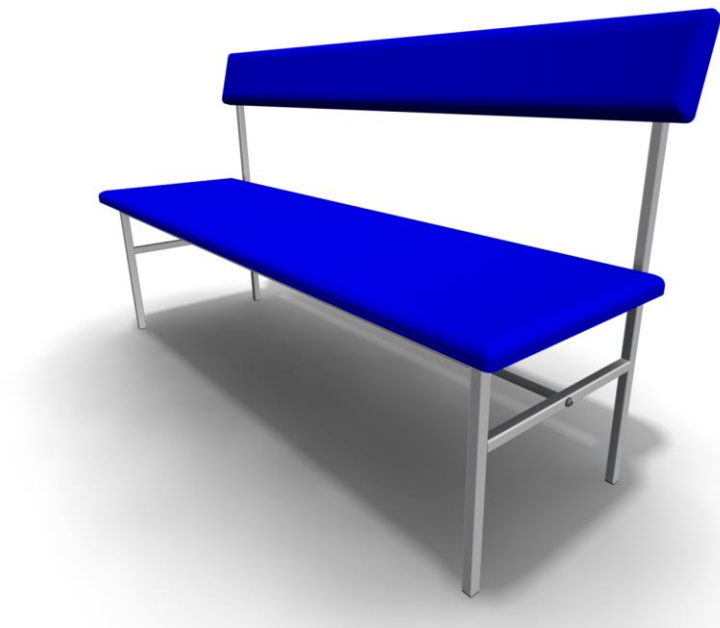

Год выпуска 2023

Назначение изделия:

Банкетка со спинкой БМС- «Горское» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

Технические характеристики:

Конструкция банкетки со спинкой БМС- «Горское» изготовлена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сиденье и спинка), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей.

Габаритные размеры,

мм: Длина 1500 ±5
Ширина 445 ±5
Высота 830 ±5

Масса, кг – 17 ±5%

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1530x435x95
Масса (с упаковкой), кг – 18 ±5%

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. – 0,06

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

**Правила
хранения, транспортировки и эксплуатации мебели**

1. Транспортировка банкетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
2. Банкетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
-предотвращение попадания осадков;
-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.
3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойки боковые	2
2	Штанга сиденья (см. обр. сторону сиденья)	2
3	Штанга спинки (см. обр. сторону спинки)	1
4	Связь нижняя продольная	1
5	Спинка	1
6	Сиденье	1
7	Винт М 10х35	6
8	Винт М 8х35	2
9	Саморез 4,2х32	8
10	Саморез 4,2х41	8
11	Паспорт изделия	1

Инструкция по сборке

1. Соединить боковые стойки со штангами сиденья при помощи винтов М10х35 (4 шт) мм в резьбовые соединения.
2. Соединить штангу спинки с боковыми стойками при помощи винтов М10х35 (2 шт) мм в резьбовые соединения.
3. Соединить продольную связь под сиденьем с поперечными связями на ножках винтом М8х35 (2 шт) в резьбовые соединения
4. Закрепить сиденье к металлокаркасу при помощи саморезов 4,2х41мм (8 шт)
5. Закрепить спинку к металлокаркасу при помощи саморезов 4,2х32мм (8 шт)